


68,4

77,3

VERSIÓN: OT:15472

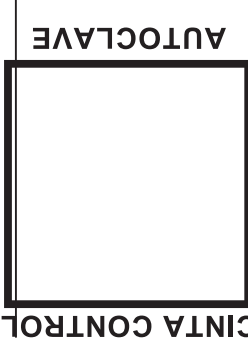


¡PRECAUCIÓN!
MATERIAL CORTOPUNZANTE CONTAMINADO

EL TRANSPORTE Y MANEJO
DE RESIDUOS CLÍNICOS DE ESTE
ENVASE ES DE RESPONSABILIDAD
DEL GENERADOR




INSTRUCCIONES DE ARMADO

1

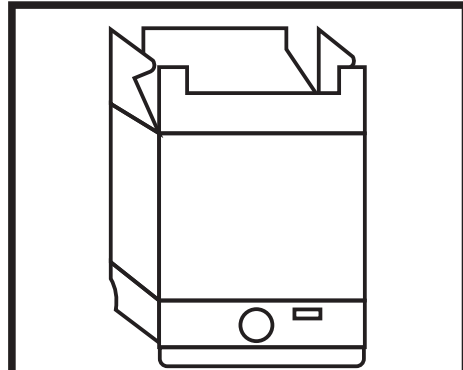


Despliegue la caja retornándola a su posición volumétrica. Compruebe la correcta ubicación del refuerzo interior (esta debe cubrir las cuatro caras y el fondo de la caja).

2

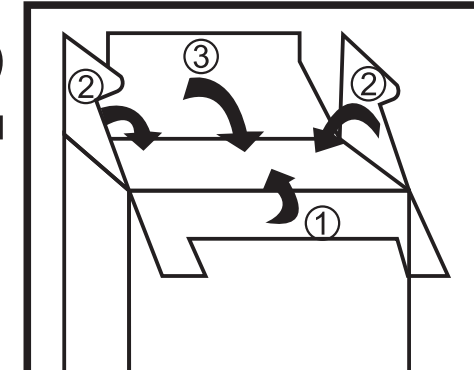


Doble los pliegues de acuerdo al orden indicado en la figura.

3

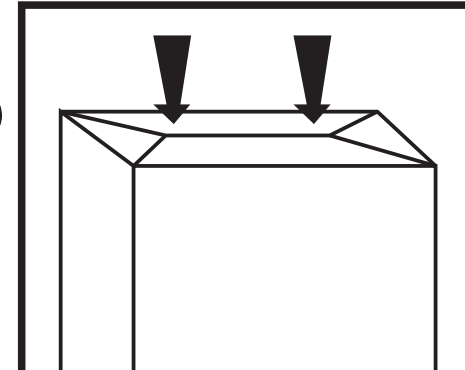


Presione simultáneamente con ambos pulgares en el sitio indicado en la figura hasta lograr el ensamble de la cara inferior de la caja.

4

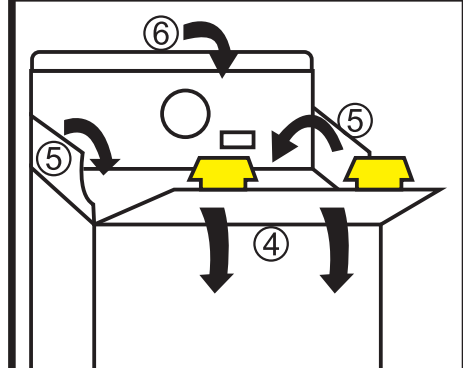


Doble los pliegues de ensamble de la cara superior de la caja, de acuerdo al esquema de la figura, tomando la precaución que la cubierta quede libre.

5

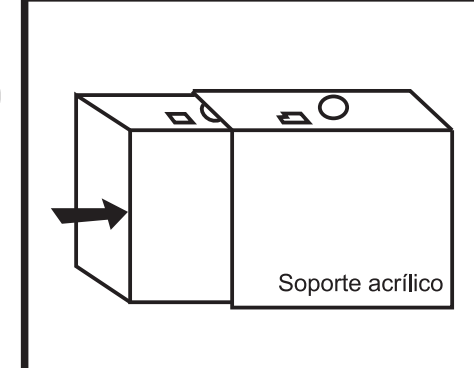

Deslice la caja de seguridad en el interior del soporte de acrílico, cuidando de hacer calzar perforaciones. La cubierta de cierre debe quedar hacia atrás, aprisionada entre la caja y el soporte.

6

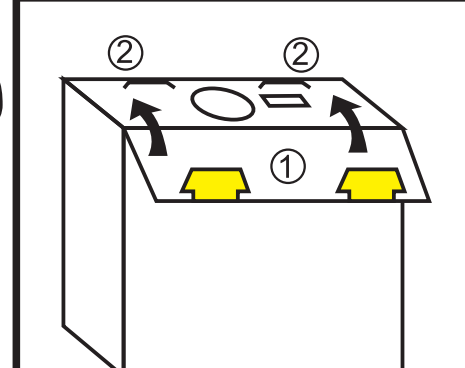

Una vez llena la caja retire ésta del soporte acrílico. Doble e inserte las aletas de cierre de seguridad y presione suavemente.

NIVEL MAXIMO

- Nombre del Establecimiento
- Nombre del Servicio o Unidad
-



- Categoría de Residuos
- Subcategoría de Residuos

CLARMED
Artículos Médicos

FABRICADO POR:
www.clarmed.cl
ventas@clarmed.cl

CAJA DE MATERIAL CORTOPUNZANTE CONTAMINADO

NIVEL MAXIMO DE LLENADO

NIVEL MAXIMO DE LLENADO



IMPORTANTE

El buen uso de esta caja y no sobrepasando el nivel máximo de llenado permite minimizar riesgos de contagio con el VIH (SIDA) y otras enfermedades tales como la hepatitis u otros virus.

SIGA ESTAS INSTRUCCIONES

- No vierta líquidos.
- No presione este envase, los materiales cortopunzantes podrían traspasar las paredes.
- Reemplace la caja una vez que alcance el nivel máximo de llenado.

WWW.CLARMED.CL

WWW.CLARMED.CL



NIVEL MAXIMO

ELIMINACION DE AGUJAS Y JERINGAS

- Las agujas se deben eliminar por el orificio rectangular.
- La jeringa se debe eliminar por el orificio circular **sin** aguja.
- LAS AGUJAS CON HILO Y LAS AGUJAS CON CONO se deben eliminar trabándolas en el rectángulo, gire la jeringa hasta que se suelte.



CLARMED
Artículos Médicos

FABRICADO POR:
www.clarmed.cl
ventas@clarmed.cl

Claudio Antonio Camus Vera
Caja CLARMED Grande

27,3 x 10,5 x 21,3 cm.
Cuch. a cuch.: **68,4** x 77,3 cm
Pliego: **70** x 81 cm = 1

Según muestra

Negro

PINZA